

PRÓTESIS ROBÓTICA INTELIGENTE

Tecnología que se adapta **a tu movimiento**

DexSync es una prótesis robótica de miembro superior que utiliza sensores mioeléctricos para interpretar las señales musculares del usuario, ofreciendo un control natural e intuitivo de cada movimiento.

24

PATRONES DE AGARRE

385g

PESO TOTAL

18h

AUTONOMÍA

Conocer más

Enviar consulta



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


¿Qué es DexSync?

Toda la información que necesitas conocer sobre el funcionamiento y las características técnicas de nuestra prótesis robótica.

Funcionamiento

DexSync funciona mediante un sistema de sensores mioeléctricos HD superficiales que detectan las señales eléctricas generadas por los músculos residuales del usuario. Estas señales son procesadas en tiempo real por un microprocesador con algoritmos de aprendizaje automático, permitiendo ejecutar movimientos precisos y naturales.

El sistema de encaje utiliza regulación neumática que ajusta automáticamente la presión para garantizar comodidad durante uso prolongado. La prótesis se conecta vía Bluetooth a una aplicación móvil donde el usuario puede personalizar patrones de agarre y consultar la telemetría del dispositivo.

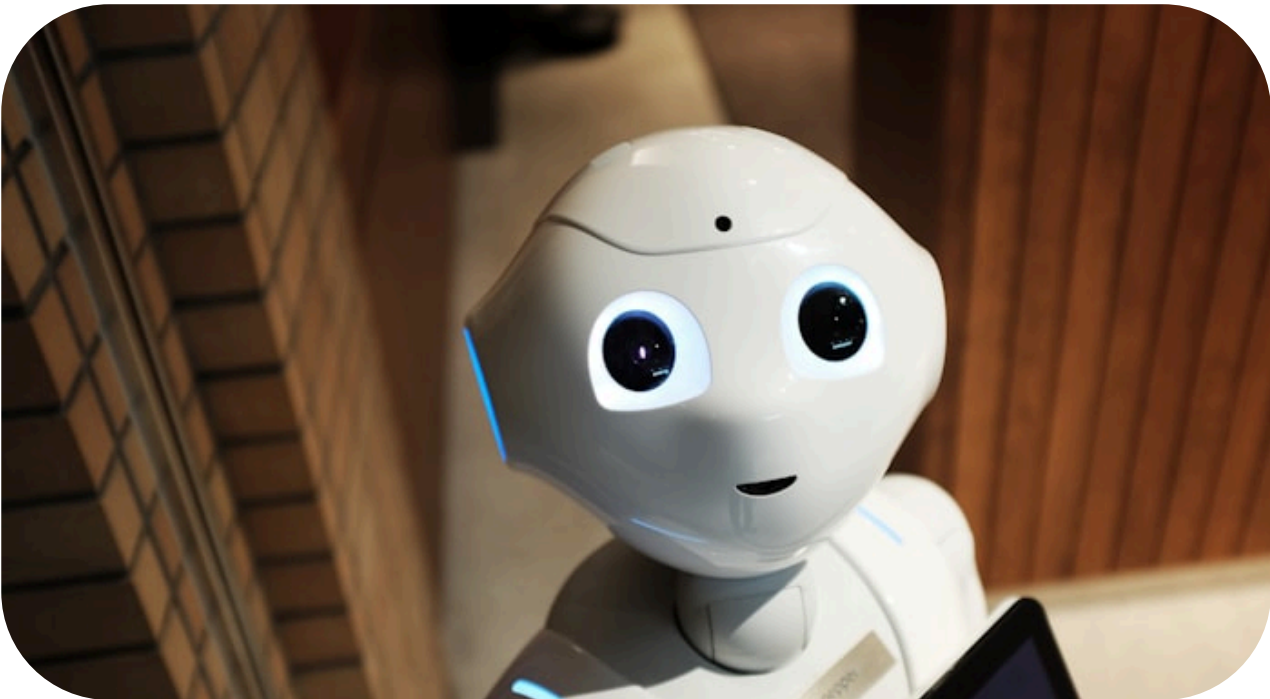

Especificaciones Técnicas

24
PATRONES DE AGARRE

385g
PESO TOTAL

18h
AUTONOMÍA

23kg
CAPACIDAD DE CARGA

Titanio Grado 5
Aleación Ti-6Al-4V de grado aeroespacial. Biocompatible, resistente a la corrosión y ultraligera.

Sensores Mioeléctricos HD
8 canales de captación a 2,000 Hz para lectura precisa de señales musculares residuales.

Socket Neumático
Sistema de vacío activo con cámaras independientes que ajustan la presión en tiempo real.

[¿POR QUÉ DEXSYNC?](#)

Beneficios Principales

Ventajas concretas que hacen de DexSync una solución líder en rehabilitación protésica.

Control Intuitivo

Los sensores mioeléctricos interpretan tus señales musculares, haciendo que el movimiento se sienta natural desde el primer día.

Respuesta Inmediata

El microprocesador NXC-7 procesa las señales a 1,200 ciclos por segundo, eliminando cualquier retardo perceptible.

Batería de Larga Duración

Hasta 18 horas de uso continuo con una sola carga, cubriendo las actividades de un día completo sin interrupciones.

Ultraligera y Cómoda

Con solo 385 gramos y un socket neumático autoajutable, el usuario puede llevarla durante horas sin fatiga ni molestias.

App de Personalización

La app DexSync Connect (iOS y Android) permite configurar patrones de agarre, monitorizar el rendimiento y recibir actualizaciones.






Certificación Internacional

Aprobada por FDA y CE como dispositivo Clase III. Fabricada bajo los estándares ISO 13485 y IEC 62304.

GALERÍA DEL PRODUCTO

Diseño y Acabados

Explora los detalles de diseño industrial, materiales y acabados de la prótesis DexSync.

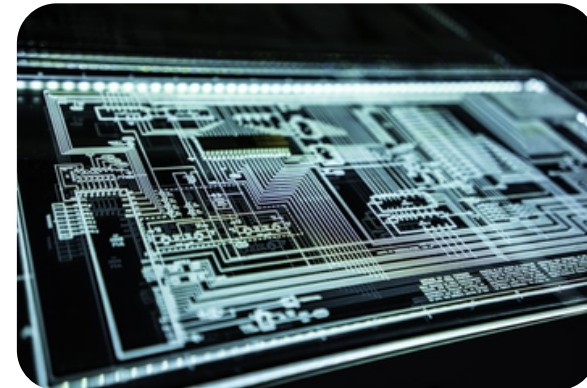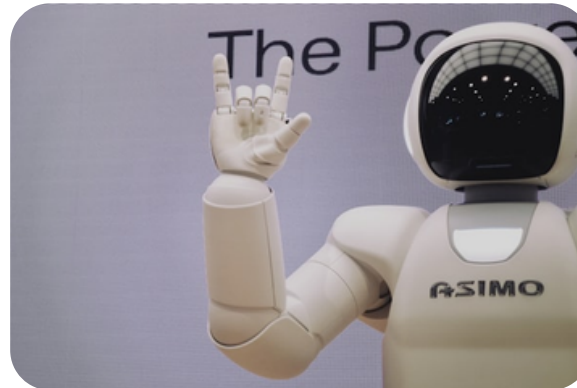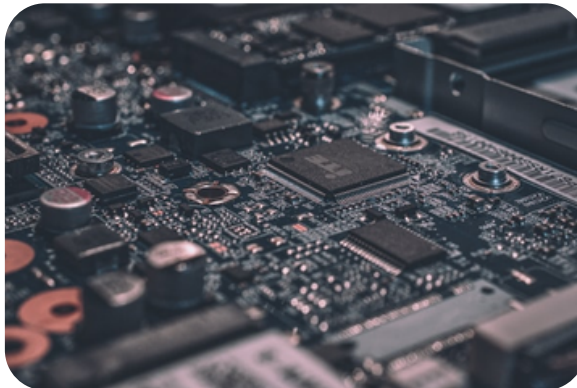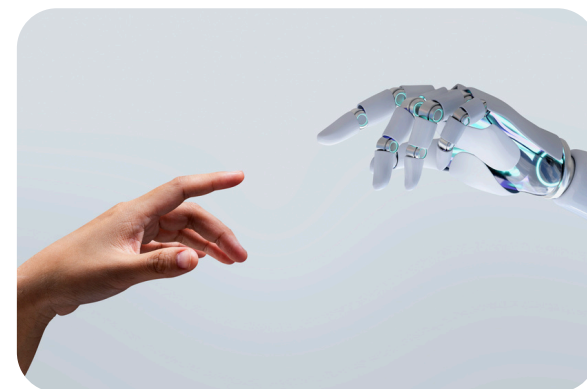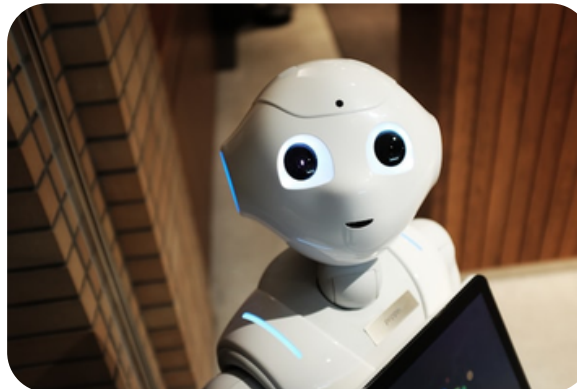

ENTORNO DE SIMULACIÓN

Control de la Mano Robótica

Explora el movimiento de la prótesis DexSync. Usa los deslizadores para controlar cada articulación de los cinco dedos de forma independiente.



Arrastra para rotar la vista


Controladores de articulaciones

Pulgar

Base (CMC) 0°



Media (MCP) 0°

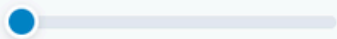

Punta (IP) 0°




Índice

Base (MCP) 0°



Media (PIP) 0°

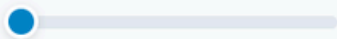

Punta (DIP) 0°




Medio

Base (MCP) 0°



Media (PIP) 0°

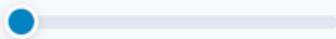

Punta (DIP) 0°




Anular

Base (MCP) 0°



Media (PIP) 0°

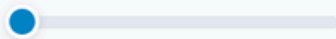

Punta (DIP) 0°




Meñique

Base (MCP) 0°



Media (PIP) 0°

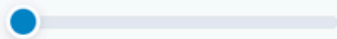

Punta (DIP) 0°



Restablecer posición

ÚLTIMAS NOVEDADES

Noticias

Actualizaciones, avances y novedades del proyecto DexSync.

**Innovación • 15 Ene 2025****DexSync presenta nueva versión con sensores de presión mejorados**

La actualización incluye sensores piezoeléctricos de segunda generación que aumentan la precisión táctil en un 40%.

**Certificación • 28 Dic 2024****Aprobación FDA para uso clínico en Estados Unidos**

DexSync recibe la certificación 510(k) que permite su comercialización y prescripción médica en territorio estadounidense.

**Rehabilitación • 10 Nov 2024****Programa de rehabilitación integral ahora incluido sin costo**

Todos los pacientes DexSync recibirán 12 sesiones de adaptación con un terapeuta ocupacional certificado.

FORMULARIO DE CONTACTO

¿Tienes alguna consulta?

Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas hábiles.

Nombre completo *

Ej: Maria Lopez

Correo electrónico *

correo@ejemplo

Teléfono de contacto

+57 356 458 54586

Asunto *

Selecciona un tema

Mensaje *

Escribe tu consulta, duda o solicitud de informacion...

Enviar solicitud

Datos de contacto



CORREO ELECTRÓNICO
INFO@DEXSYNC.COM



TELÉFONO
+1 (800) 555-3397






DIRECCIÓN
MIAMI, FL—ESTADOS UNIDOS



HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES: 8:00 – 18:00

Síguenos

Conoce más sobre DexSync en nuestras redes sociales.

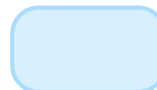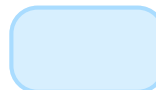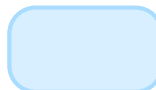

DexSync

Prótesis robótica inteligente con control mioeléctrico de última generación

Navegación

Inicio
Información
Beneficios
Galería
Noticias
Contacto

Contacto

info@dexsync.com
+1 (800) 555-3397
Miami, FL — EE.UU.

Redes Sociales

